




A91-052BK



Παράλληλες Μπάρες Γυμναστικής με Ιμάντες


Λίστα εξαρτημάτων

| Σωλήνας λαβής (2 τεμάχια) | Κάτω σωλήνας (2 τεμάχια) | Βίδες (8 τεμάχια) | Αντιολισθητικό κάλυμμα (4 τεμάχια) | Βίδες για το αντιολισθητικό κάλυμμα (16 τεμάχια) |

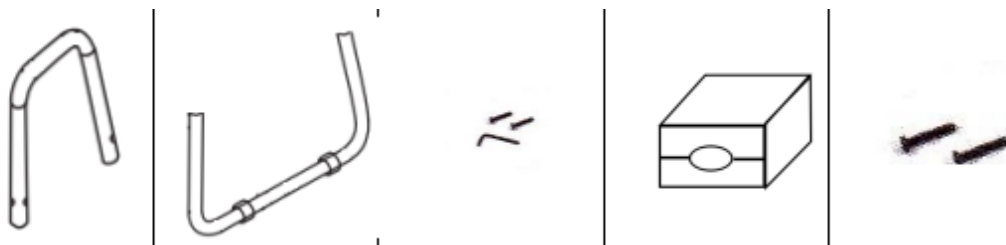

Συναρμολόγηση

1. Τοποθετήστε τον σωλήνα της λαβής στον κάτω σωλήνα. Βιδώστε τη σύνδεση με τη βίδα.
2. Τοποθετήστε το αντιολισθητικό κάλυμμα στον κάτω σωλήνα.

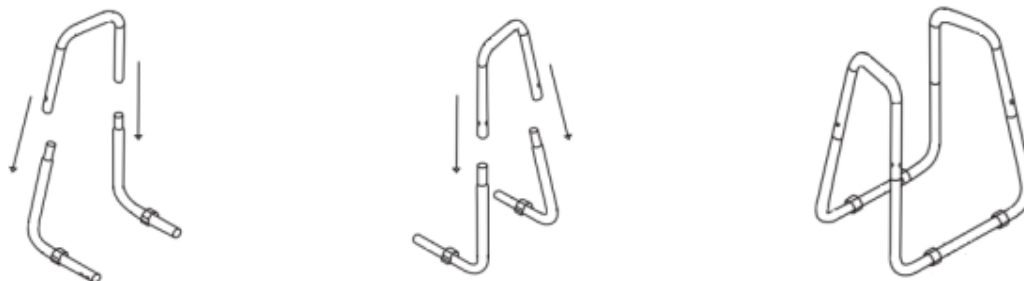

Οδηγίες ασφαλείας

- Αυτός ο αθλητικός εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε κλειστό ιδιωτικό χώρο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως εξοπλισμός προπόνησης σε επαγγελματικά γυμναστήρια κ.λπ.
- Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη σε περίπτωση ζημιών ή τραυματισμών που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή λανθασμένο χειρισμό.
- Συνιστάται να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα προπόνησης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για άτομα ηλικίας άνω των 35 ετών ή για άτομα που έχουν ήδη καρδιακά και καρδιαγγειακά προβλήματα.
- Οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές.

