

BAMBA

Αποτριχωτική Μηχανή Bamba SkinCare IPL Quartz Cecotec CEC-04245



cecotec

1. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το μαυρισμένο δέρμα, ειδικά μετά την έκθεση στον ήλιο, περιέχει μεγάλες ποσότητες χρωστικής μελανίνης. Αυτό εκθέτει το δέρμα σε υψηλότερο κίνδυνο κατά τη χρήση αυτού του τύπου συσκευών και μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα, φουσκάλες και αλλαγές στο χρώμα του δέρματος (υπερμελάγχρωση ή υπομελάγχρωση).

Σημείωση: Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο για 4 εβδομάδες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή:

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε.

Εάν το δέρμα σας εκτέθηκε σε ισχυρό ηλιακό φως ή τεχνητό μαύρισμα τις τελευταίες 2 εβδομάδες.

Εάν τα φυσικά σας μαλλιά είναι λευκά, γκριζα, χρυσαφένια ή κόκκινα.

Εάν έχετε φυσικό καφέ μαύρο ή πιο σκούρο δέρμα.

Κοντά ή γύρω από τα μάτια.

Σε τατουάζ ή μόνιμο μακιγιάζ στην περιοχή θεραπείας.

Σε σκοτεινά σημεία, όπως μεγάλες φακίδες, σημάδια, κρεατοελιές ή κονδυλώματα στην περιοχή θεραπείας.

Εάν έχετε έκζεμα, ψωρίαση, βλάβες, ανοιχτές πληγές ή ενεργές λοιμώξεις στην περιοχή θεραπείας.

Εάν έχετε ιστορικό διαταραχής του κολλαγόνου, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού χηλοειδούς ουλής ή κακής επούλωσης πληγών.

Εάν έχετε γνωστή ευαισθησία στο φως ή παίρνετε φάρμακα που κάνουν το δέρμα σας πιο ευαίσθητο στο φως. Φάρμακα που είναι γνωστό ότι έχουν αυτό το αποτέλεσμα περιλαμβάνουν μη στεροειδή αντιφλεγμονώδεις παράγοντες, (π.χ. ασπιρίνες, ιβουπροφαίνες, ακεταμινοφαίνη), τετρακυκλίνες, φαινοθειαζίνες, θειαζίδες, διουρητικά, σουλφονουλρίες, σουλφοναμίδες, DTIC, φθοριοουρακίλη, βινμπλαστίνη και γκρισέ.

Εάν λαμβάνετε ή λάβετε πρόσφατα θεραπεία με άλφα-υδροξυζέα (ΑΗΑ), βήτα-υδροξυζέα (ΒΗAs), Retin-A®, Accutane® (ισοτρετινοΐνη), τοπικά ρετινοειδή, αζελαϊκό οξύ ή στεροειδή.

Εάν έχετε μη φυσιολογικές δερματικές παθήσεις λόγω διαβήτη ή άλλης συστηματικής ή μεταβολικής νόσου.

Εάν έχετε ιστορικό εστιών έρπητα στην περιοχή θεραπείας, εκτός εάν έχετε συμβουλευτεί τον γιατρό σας και έχετε λάβει προληπτική θεραπεία.

Εάν έχετε μια ασθένεια που προκαλεί ευαισθησία στο φως, όπως πορφυρία, πολυμορφική έκρηξη φωτός, λύκος, ηλιακή κνίδωση κ.λπ.

Εάν πάσχετε από επιληψία με ευαισθησία σε φακό.

Εάν έχετε ιστορικό καρκίνου του δέρματος ή πιθανών κακοηθειών στην περιοχή θεραπείας.

Εάν έχετε λάβει ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία τους τελευταίους 3 μήνες.

Εάν έχετε εμφύτευμα, όπως βηματοδότη ή αντλία ινσουλίνης, στην περιοχή θεραπείας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη πάθηση που κατά τη γνώμη του γιατρού σας θα την καθιστούσε επικίνδυνη για εσάς.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θηλές, θηλές, θηλάες, μικρά χείλη, κόλπο, πρωκτό και στο εσωτερικό των ρουθουνιών και των αυτιών.

Οι άνδρες δεν πρέπει να το χρησιμοποιούν στο πρόσωπο ή στο όσχεο.

Πότε να συμβουλευτείτε το γιατρό σας

Εάν παίρνετε συνταγογραφούμενα φάρμακα ή λαμβάνετε τακτική ιατρική παρακολούθηση λόγω μιας συγκεκριμένης πάθησης, συμβουλευτείτε το γιατρό σας προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Θα πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε το γιατρό σας εάν δεν είστε σίγουροι εάν η συσκευή είναι κατάλληλη για εσάς.

Για να αποφύγετε αρνητικές επιπτώσεις:

Μην θεραπεύετε την ίδια περιοχή του δέρματος περισσότερες από μία φορές κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας.

Πάντα να ξυρίζετε την περιοχή της θεραπείας πριν από τη θεραπεία και να βεβαιωθείτε ότι το δέρμα στην περιοχή θεραπείας είναι καθαρό και στεγνό.

Μην καθαρίζετε το δέρμα με εύφλεκτα υγρά, όπως αλκοόλ ή ασετόν, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Πιθανές παρενέργειες

Οι επιπλοκές που σχετίζονται με τη χρήση συσκευών αποτρίχωσης IPL είναι ασυνήθιστες. Ωστόσο, κάθε αισθητική επέμβαση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν σχεδιαστεί για οικιακή χρήση, ενέχει κάποιο βαθμό κινδύνου.

Επομένως, είναι σημαντικό να κατανοήσετε και να αποδεχτείτε τους κινδύνους και τις επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν με τα συστήματα αποτρίχωσης με έντονο παλμικό φως που έχουν σχεδιαστεί για οικιακή χρήση.

Το δέρμα σας μπορεί να εμφανίσει ελαφρά ερυθρότητα και/ή μπορεί να μυρμηγκιάζει ή να αισθάνεται ζεστό. Αυτή η αντίδραση είναι απολύτως ακίνδυνη και εξαφανίζεται γρήγορα.

Μια δερματική αντίδραση παρόμοια με το ηλιακό έγκαυμα μπορεί να εμφανιστεί στην υπό θεραπεία περιοχή για λίγο. Εάν αυτό δεν εξαφανιστεί εντός 3 ημερών, σας συμβουλευόμαστε να συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Ξηρό δέρμα και κνησμός μπορεί να εμφανιστούν λόγω του ξυρίσματος ή του συνδυασμού ξυρίσματος και ελαφριάς θεραπείας. Αυτό είναι αβλαβές και εξαφανίζεται μέσα σε λίγες μέρες. Μπορείτε να δροσίσετε την περιοχή με μια παγοκύστη ή ένα βρεγμένο πανί προσώπου. Εάν η ξηρότητα επιμένει, μπορείτε να εφαρμόσετε μια ενυδατική κρέμα χωρίς άρωμα στο δέρμα 24 ώρες μετά τη θεραπεία. Μικρή δυσφορία στο δέρμα.

Ερυθρότητα του δέρματος.

Αυξημένη ευαισθησία του δέρματος.

Δερματικά τραύματα και εγκαύματα. Πολύ σπάνια, μπορεί να εμφανιστούν εγκαύματα ή τραύματα στο δέρμα μετά τη χρήση της συσκευής. Το έγκαυμα ή η πληγή μπορεί να χρειαστούν μερικές εβδομάδες για να επουλωθούν και, εξαιρετικά σπάνια, μπορεί να αφήσουν μια αξιοσημείωτη ουλή.

Ουλές. Αν και πολύ σπάνιο, μπορεί να εμφανιστούν ουλές. Συνήθως όταν εμφανίζονται ουλές, είναι με τη μορφή μιας επίπεδης και λευκής βλάβης στο δέρμα (υποτροφία). Ωστόσο, μπορεί να είναι μεγάλη και κόκκινη

(υπερτροφικό) ή μεγάλο και εκτείνεται πέρα από τα όρια του ίδιου του τραυματισμού (χηλοειδές).

Μπορεί να απαιτηθεί επακόλουθη αισθητική χρήση για τη βελτίωση της εμφάνισης της ουλής.

Υπερβολική ερυθρότητα και πρήξιμο. Πολύ σπάνια, το δέρμα της περιοχής αποτρίχωσης μπορεί να γίνει πολύ κόκκινο και πρησμένο. Αυτό είναι πιο συχνό σε ευαίσθητες περιοχές του σώματος. Η ερυθρότητα και το πρήξιμο πρέπει να υποχωρήσουν μέσα σε 2 έως 7 ημέρες. Η εφαρμογή πάγου μπορεί να βοηθήσει στη μείωση

το πηγάδι. Επιτρέπεται ο απαλός καθαρισμός του δέρματος, αλλά πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο. Μόλυνση. Η μόλυνση του δέρματος είναι εξαιρετικά σπάνια. Ωστόσο, είναι ένας πιθανός κίνδυνος μετά από έγκαυμα ή πληγή δέρματος που προκαλείται από τη χρήση της συσκευής.

Μώλωπες. Πολύ σπάνια, η χρήση της συσκευής θα μπορούσε να προκαλέσει μπλε-μωβ μώλωπες που μπορεί να διαρκέσουν 5 έως 10 ημέρες.

2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1.

1. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/επιπέδου έντασης
2. Φωτεινή ένδειξη επιπέδου έντασης
3. Ένδειξη ετοιμότητας/προειδοποιητική λυχνία χρώματος δέρματος
4. Πρίζα
5. Επιφάνεια επαφής με το δέρμα
6. Παράθυρο με φλας
7. Κουμπί φλας
8. Προσαρμογέας
9. Μικρό βύσμα μετασχηματιστή AC

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις ετικέτες πριν συνδέσετε τη συσκευή. Φυλάξτε το αρχικό κουτί. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Εάν παρατηρήσετε ορατά σημάδια ζημιάς, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αυτή η συσκευή προορίζεται για την αφαίρεση ανεπιθύμητων τριχών. Είναι σε θέση να προσφέρει μακροπρόθεσμη μείωση του αριθμού των τριχών που ξαναφυτρώνουν μετά τη θεραπεία.

Σημειώσεις:

1. Επιλέξτε το επίπεδο ισχύος έντασης ανάλογα με τον τόνο της επιδερμίδας σας. Οι λυχνίες έντασης γύρω από το κουμπί έντασης υποδεικνύουν το επίπεδο έντασης στο οποίο έχει ρυθμιστεί η συσκευή. Καθώς αυξάνεται το επίπεδο έντασης, αυξάνονται και τα αποτελέσματα καθώς και ο κίνδυνος παρενεργειών.
2. Ξεκινάτε πάντα να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο χαμηλότερο επίπεδο έντασης. Μόνο εάν νιώσετε ελάχιστη ή καθόλου ενόχληση κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση στο χαμηλότερο επίπεδο έντασης, αυξήστε την ένταση κατά ένα επίπεδο την επόμενη φορά.

3. Αποφύγετε τις δυσμενείς επιπτώσεις.

Μην το χρησιμοποιείτε στην ίδια περιοχή του δέρματος περισσότερες από μία φορές κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας.

Αποφύγετε τα επικαλυπτόμενα φλας.

Εάν το δέρμα σας εμφανίσει φουσκάλες ή καεί, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αμέσως.

4. Αποφύγετε τις επιπλοκές μετά τη χρήση.

ένα. Μην εκθέτετε τις υπό θεραπεία περιοχές στον ήλιο. Η έκθεση στον ήλιο περιλαμβάνει συνεχή έκθεση χωρίς προστασία στο άμεσο ηλιακό φως για πάνω από 15 λεπτά ή μη προστατευμένη έκθεση στο διάχυτο ηλιακό φως για 1 ώρα. Εφαρμόστε προσεκτικά την οθόνη με SPF 30 ή υψηλότερο για 2 εβδομάδες μετά από κάθε συνεδρία αποτρίχωσης.

σι. Καλύψτε τα σημάδια και τα τατουάζ πριν από τη χρήση. Καλύψτε τα σκούρα καφέ ή μαύρα στίγματα, όπως μεγάλες φακίδες, σημάδια, κρεατοελιές ή κονδυλώματα πριν από τη χρήση.

Κατάλληλα χρώματα μαλλιών σώματος Εικ. 2.

Χρήση και αποτελεσματικότητα

Τύπος δέρματος	Χρώμα μαλλιών	Ίελαφριά ένταση	Μέρος του σώματος	Χρήση	Αποτελεσματικότητα (% αποτρίχωσης/ανάπτυξης)
I-IV	Αποτελεσματικότητα (% αποτρίχωσης/ανάπτυξης) σε καφέ	Max. 4	Κάτω ή πάνω πόδια	συνεδρία 10-12, 4 εβδομάδες	60% μείωση τρίχας
			Μπράτσα		55 % μείωση τρίχας
			γραμμή bikini		60 % μείωση τρίχας
			Μασχάλες		50 % μείωση τρίχας

Τύπος δέρματος	Χρώμα μαλλιών	ιΕλαφριά ένταση	Μέρος του σώματος	Χρήση	Αποτελεσματικότητα (% αποτρίχωση/ανάπτυξης)
I-IV	καφε μαύρα	Μαχ. 4	Lower or upper legs	συνεδρία 8-10 4 εβδομάδες	70 % μείωση τρίχας
			Μπράτσα		60 % μείωση τρίχας
			γραμμή bikini		70 % μείωση τρίχας
			Μασχάλες		65 % μείωση τρίχας

Σημείωση: Η αποδοτική ανταπόκριση εξαρτάται από τον τύπο της τρίχας καθώς και από βιολογικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τα μοτίβα ανάπτυξης των μαλλιών. Ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να ανταποκρίνονται πιο γρήγορα ή πιο αργά από τον μέσο αριθμό χρήσης. Μην περιμένετε μόνιμη μείωση τρίχας σε μία ή δύο συνεδρίες. Η διάρκεια της περιόδου ανάπαυσης των τριχοθυλακίων εξαρτάται επίσης από την περιοχή του σώματος.

Προετοιμασία για χρήση

Προεπεξεργασία του δέρματος

Αφαιρέστε τις τρίχες στην επιφάνεια του δέρματός σας. Αυτό επιτρέπει στο φως να απορροφηθεί από τα μέρη της τρίχας κάτω από την επιφάνεια του δέρματος για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση. Μπορείτε είτε να ξυριστείτε, είτε να κόψετε, είτε να κάνετε αποτρίχωση είτε με κεριά. Μην χρησιμοποιείτε αποτριχωτικές κρέμες, καθώς οι χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσουν δερματικές αντιδράσεις.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΧΕΣ, ΕΝΤΕΛΩΣ ΞΗΡΟ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΛΑΔΙ

ΘΕΣΣΕΙΣ.

Σημείωση: Εάν το ξύρισμα προκαλεί ερεθισμό του δέρματος, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέχρι να εξαφανιστεί ο ερεθισμός.

Δερματικό τεστ

Πριν από την πρώτη σας θεραπεία, κάντε μια δερματική δοκιμή για να καθορίσετε το κατάλληλο επίπεδο έντασης για κάθε μέρος του σώματος.

1. Επιλέξτε μια περιοχή κοντά στην περιοχή όπου θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Σημείωση: Μην δοκιμάζετε τη συσκευή σε δύσκολες ή ευαίσθητες περιοχές (περιοχή αστραγάλου και οστών).

2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο έντασης.

3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε γωνία 90B στο δέρμα έτσι ώστε το ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας να έρθει σε επαφή με το δέρμα σας.

Σημείωση: Το ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας αποτρέπει την ακούσια αναλαμπή χωρίς επαφή με το δέρμα.

4. Πατήστε το κουμπί φλας για να απελευθερώσετε ένα φλας.

5. Μετακινήστε τη συσκευή σε άλλη περιοχή και αφήστε ένα φλας στο επίπεδο 2. Συνεχίστε να αυξάνετε την ένταση κατά ένα επίπεδο πριν απελευθερώσετε κάθε επόμενο φλας. Μην απελευθερώνετε περισσότερα από ένα φλας στο ίδιο σημείο. Μην αυξάνετε την ένταση πέρα από τη μέγιστη ένταση για το χρώμα του δέρματός σας.

6. Μόλις αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση, μειώστε το επίπεδο έντασης στο υψηλότερο επίπεδο στο οποίο δεν υπήρχε ενόχληση.

7. Σταματήστε τις δοκιμές. Περιμένετε 24 ώρες και στη συνέχεια ελέγξτε το δέρμα σας για τυχόν αντιδράσεις. Εάν δεν βλέπετε δερματικές αντιδράσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το επίπεδο έντασης που χρησιμοποιήσατε τελευταία στην επόμενη θεραπεία αυτού του μέρους του σώματος.

Σημείωση: Εάν το δέρμα σας εμφανίσει αντίδραση, περιμένετε να εξαφανιστεί η αντίδραση. Στη συνέχεια, θεραπεύστε το μέρος του σώματος στο επίπεδο έντασης κάτω από αυτό που προκάλεσε αντίδραση, περιμένετε 24 ώρες και ελέγξτε ξανά για δερματικές αντιδράσεις.

8. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα σε όλα τα μέρη του σώματος που σκοπεύετε να θεραπεύσετε.

Χρήση Bamba SkinCare IPL Quartz

Αισθητήρας τόνου δέρματος

Το προϊόν διαθέτει λειτουργία αναγνώρισης χρώματος δέρματος.

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, το παράθυρο του φακού πρέπει να έρχεται σε πλήρη επαφή με το δέρμα. Η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνει 5 φορές υποδεικνύοντας ότι η συσκευή αναγνωρίζει τον τόνο του δέρματος. Ανάλογα με τον τόνο του δέρματός σας, η συσκευή θα σας προτείνει την κατάλληλη για εσάς ένταση.

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/στάθμης έντασης μία φορά για να επιβεβαιώσετε το συνιστώμενο επίπεδο έντασης και δύο φορές για να ξεκινήσετε τη συσκευή.

Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία αναγνώρισης δέρματος και ο αισθητήρας ανιχνεύει πολύ σκούρο τόνο δέρματος

(συμπεριλαμβανομένου του σκούρου καφέ), η προειδοποιητική ένδειξη χρώματος δέρματος θα γίνει πορτοκαλί και θα αναβοσβήνει. Αυτό υποδεικνύει ότι ο αισθητήρας τόνου δέρματος δεν μπορούσε να αναγνωρίσει το χρώμα του δέρματος και η συσκευή δεν θα λειτουργήσει.

Επιλέγοντας τη σωστή ένταση

Η ένταση του φλας που φτάνει στο δέρμα σας ρυθμίζεται με το κουμπί On/Off/Επίπεδο έντασης.

Υπάρχουν 5 επίπεδα έντασης. Η αντίστοιχη φωτεινή γραμμή έντασης θα ανάψει όταν επιλεγεί ένα επίπεδο έντασης.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη χαμηλότερη ρύθμιση στην αρχή και αυξάνετε προσεκτικά.

Πατήστε το κουμπί On/Off/Επίπεδο έντασης για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο έντασης. Μετά από 1 κύκλο (1-5) επιστρέφει στο επίπεδο 1.

Τύπος δέρματος/τόνος δέρματος

Τύπος δέρματος	Απόχρωση δέρματος	Επίπεδο έντασης
I	Λευκό	4-5
II	Μπεζ	3-4
III	Ανοιχτό καφέ	2-3
IV	Μεσαίο καφέ	1-2
V	Σκούρο καφέ	Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή
VI	Καφετί μαύρο ή πιο σκούρο	Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή

Σημείωση: Το δέρμα σας μπορεί να αντιδρά διαφορετικά σε διαφορετικές ημέρες/περιστάσεις για διάφορους λόγους.

Μέθοδος χειροκίνητης λειτουργίας

Συνδέστε τη συσκευή σε τροφοδοτικό. Περιμένετε μέχρι να ανάψει κόκκινο η ένδειξη ετοιμότητας.

Πατήστε το κουμπί On/Off/Ένταση. Το φως έντασης επιπέδου 1 θα ανάψει και ο ανεμιστήρας μέσα στη συσκευή θα ξεκινήσει.

Μετά από περίπου 1 δευτερόλεπτο, ανάβει η προειδοποιητική λυχνία Ready/χρώμα δέρματος. Αυτό δείχνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη να απελευθερώσει ένα φλας.

Πατήστε το κουμπί On/Off/Ένταση μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε το επίπεδο έντασης που είναι κατάλληλο για την περιοχή θεραπείας και το χρώμα του δέρματός σας.

Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή θεραπείας είναι καθαρή, στεγνή και σωστά ξυρισμένη. Τοποθετήστε την επιφάνεια επαφής με το δέρμα στο δέρμα σε γωνία 90°.

Πατήστε το κουμπί φλας.

Αυτόματη ανίχνευση τόνου δέρματος

Συνδέστε τη συσκευή σε τροφοδοτικό. Περιμένετε μέχρι να ανάψει κόκκινο η ένδειξη ετοιμότητας.

Πατήστε το κουμπί On/Off/Ένταση. Το φως έντασης επιπέδου 1 θα ανάψει και ο ανεμιστήρας μέσα στη συσκευή θα ξεκινήσει.

Τοποθετήστε την επιφάνεια επαφής με το δέρμα στο δέρμα σε γωνία 90°. Το ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας θα αποτρέψει την ακούσια αναλαμπή χωρίς επαφή με το δέρμα. Η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει με πράσινο χρώμα. Πατήστε το κουμπί φλας. Η συσκευή θα επιλέξει ένα κατάλληλο επίπεδο έντασης για το χρήστη ανάλογα με τον τόνο του δέρματος. Η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη έντασης θα ανάψει.

Σημείωση: Είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε το παράθυρο του φωτός του φλας ερμητικά κλειστό στο δέρμα, προκειμένου ο αισθητήρας να μπορεί να ανιχνεύσει τον τόνο του δέρματος. Επειδή διαφορετικά μέρη του δέρματος μπορεί να έχουν διαφορετικούς τόνους, επαναλάβετε το τελευταίο βήμα κάθε φορά που αλλάζετε ζώνη.

Ενώ λειτουργεί ο ανεμιστήρας, κρατήστε το παράθυρο του φωτός του φλας σφικτά κοντά στο δέρμα και πατήστε το κουμπί του φλας. Η φωτεινή ένδειξη θα γίνει πράσινη και θα αναβοσβήνει.

Πατήστε το κουμπί φλας για να ξεκινήσετε την αφαίρεση τρίχας.

Η απελευθέρωση αναβοσβήνει το ένα δίπλα στο άλλο για να διασφαλιστεί ότι θα αφαιρεθούν οι τρίχες από ολόκληρη την περιοχή. Φροντίστε να μην απελευθερώσετε περισσότερα από 1 φλας στην ίδια περιοχή.

Σημείωση:

Μην χρησιμοποιείτε κανένα μολύβι ή στυλό για να σημειώσετε τις περιοχές, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες στο δέρμα σας. Το φλας στην ίδια περιοχή δεν βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της χρήσης αλλά αυξάνει τον κίνδυνο δερματικών αντιδράσεων.

Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, κρατήστε πατημένο το κουμπί On/Off για 2 δευτερόλεπτα για να την απενεργοποιήσετε.

Μέθοδοι που αναβοσβήνουν

Χειροκίνητο φλας

Ιδανικό για χρήση σε μικρές ή με καμπύλες περιοχές όπως γόνατα και μασχάλες. Απλώς πατήστε και αφήστε το κουμπί φλας για να απελευθερώσετε ένα μόνο φλας.

Συρόμενο φλας

Ιδανικό για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες όπως πόδια. Κρατήστε πατημένο το κουμπί φλας ενώ σύρετε τη συσκευή πάνω από το δέρμα σας για να απελευθερώσετε πολλά φλας στη σειρά.

Σημείωση: Εάν ο ανεμιστήρας ψύξης σταματήσει να περιστρέφεται, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αμέσως, διαφορετικά μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη του φλας λόγω υψηλής θερμοκρασίας και να προκαλέσει βλάβη στο δέρμα.

Μετά τη θεραπεία αποτρίχωσης

Όταν ολοκληρώσετε τον κύκλο αποτρίχωσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έντασης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Φροντίστε να θυμάστε την τελευταία ρύθμιση επιπέδου έντασης που χρησιμοποιήσατε, καθώς η συσκευή επαναφέρεται αυτόματα στη χαμηλότερη ρύθμιση όταν είναι απενεργοποιημένη και δεν θυμάται την προηγούμενη επιλεγμένη ρύθμιση.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

Περιποίηση δέρματος μετά την αποτρίχωση

Μην εκθέτετε το επεξεργασμένο δέρμα στον ήλιο. Εάν πρόκειται να εκτεθεί, εφαρμόστε σχολαστικά αντηλιακό SPF 30 ή υψηλότερο για 2 εβδομάδες μετά από κάθε αποτρίχωση.

Παρενέργειες και επιπλοκές

Ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αλλαγές μελάγχρωσης ως αποτέλεσμα θεραπείας με τη συσκευή αποτρίχωσης IPL. Αυτές οι επιδράσεις, εάν εμφανιστούν, είναι γενικά ήπιες και παροδικές. Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε επιπλοκή, επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν την καθαρίσετε.

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση, ειδικά την επιφάνεια επαφής με το δέρμα.

Μετά τον καθαρισμό, αποθηκεύστε το στο αρχικό του κουτί και κρατήστε το μακριά από νερό.

Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό, καθαρό πανί και ένα ειδικά σχεδιασμένο καθαριστικό για ηλεκτρονικό εξοπλισμό για να σκουπίσετε απαλά το εξωτερικό περίβλημα και την επιφάνεια επαφής με το δέρμα της συσκευής.

Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματά της σε νερό.

6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Το Bamba SkinCare IPL Quartz δεν ανάβει.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας είναι σωστά συνδεδεμένος στο τροφοδοτικό.

Δεν εκπέμπεται φλας όταν πατηθεί το κουμπί φλας

Βεβαιωθείτε ότι η πράσινη λυχνία ετοιμότητας αναβοσβήνει.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε πλήρη επαφή με το δέρμα. Για την ασφάλειά σας, το κουμπί φλας θα ενεργοποιήσει ένα φλας μόνο εάν η επιφάνεια επαφής του δέρματος είναι σε πλήρη επαφή με το δέρμα.

Ελέγξτε εάν η προειδοποιητική λυχνία χρώματος δέρματος αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα. Εάν συμβεί αυτό, ο αισθητήρας χρώματος δέρματος έχει σταματήσει την εκπομπή του φλας. Το δέρμα σας μπορεί να είναι πολύ σκούρο για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε διαφορετικό σημείο του σώματός σας.

Εάν η λυχνία ετοιμότητας ανάβει συνεχώς μαζί με οποιαδήποτε άλλη λυχνία, υπάρχει σφάλμα συστήματος. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την. Στη συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή και προσπαθήστε να την ενεργοποιήσετε ξανά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

Ελέγξτε εάν η προειδοποιητική λυχνία συστήματος είναι αναμμένη και όλες οι άλλες λυχνίες αναβοσβήνουν. Εάν ναι, αποσυνδέστε τη συσκευή. Η συσκευή έφτασε στο τέλος της ζωής της.

Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν: Bamba SkinCare IPL Quartz

Αναφορά προϊόντος: 04245

Τεχνολογία: Έντονο παλμικό φως


Διάρκεια φλας: 500-800 usc

Μήκος κύματος: 475-1200 nm

Ισχύς εξόδου: Μέγ. 4j/cm²

100-240 V; 50-60 hZ; 0,5 A

8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

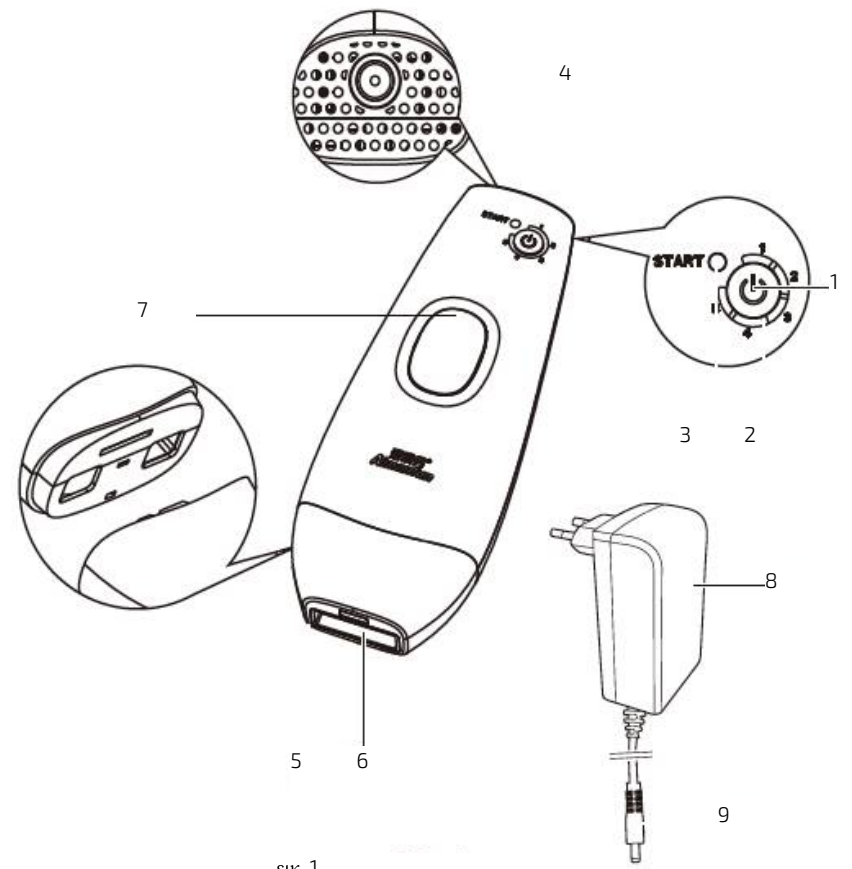

εικ. 1



εικ. 2