


ΜΑΣΑΖ ΛΑΙΜΟΥ

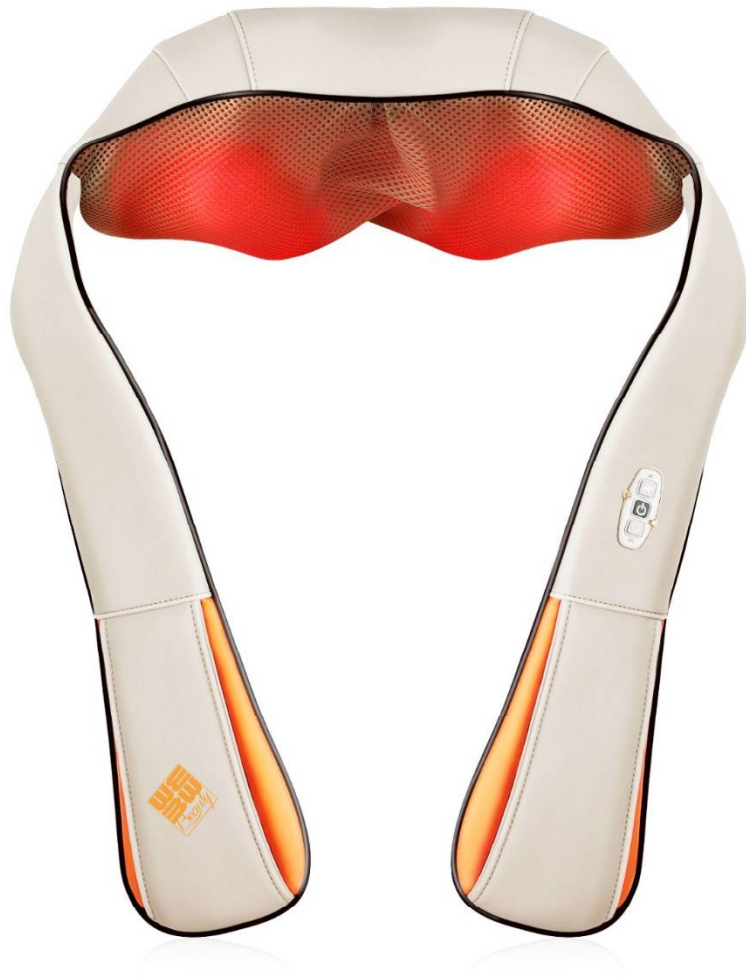

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

BN4304

DC 12V 24W 50 Hz

Γενικά Μέτρα Ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
2. Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχει κάποιο κακό καλώδιο ή βύσμα ή μετά από δυσλειτουργία. Θα πρέπει πάντα να επισκευάζεται ή να εξετάζεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
3. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Επίσης, μην εκτίθεται σε βροχή ή υγρές συνθήκες. Η είσοδος νερού στη συσκευή θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη, ειδικά εάν υπάρχουν παιδιά κοντά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
5. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται κάτω ή σε καυτές επιφάνειες.
6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
7. Η χρήση μη συνιστώμενων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αυτό.
8. Δεν είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση.
9. Μην το τοποθετείτε σε πηγές θερμότητας, όπως φούρνους, εστίες υγραερίου... κ.λπ.
10. Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, υφασμάτινα καλύμματα κ.λπ., για να αποτρέψετε την πυρκαγιά.
11. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. (Δεν είναι ευθύνη του κατασκευαστή ή του πωλητή, αλλά του επιβλέποντος ενήλικα).
12. Δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτό το προϊόν.
13. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι 8 ετών και άνω και επιβλέπονται.
14. Για να αποσυνδέσετε τραβήξτε το φισ και όχι το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για τη μεταφορά της συσκευής.
15. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε πάντα ότι η τάση του μηχανήματος ταιριάζει με αυτή του ηλεκτρικού δικτύου στο οποίο πρόκειται να συνδεθεί.
16. Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση, όχι για εμπορική ή επαγγελματική χρήση.
17. Εάν η συσκευή διαθέτει βύσμα κινητού, πρέπει να αφαιρεθεί πριν τον καθαρισμό. Η βάση του συνδετήρα πρέπει να αφαιρεθεί πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο η κατάλληλη πρίζα κινητού.
18. Αφήστε να κρυώσει πριν το αποθηκεύσετε.

Τρόπος χρήσης



Θερμαντικό σώμα

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τα κουμπιά ενώ εργάζεστε, πατήστε το κουμπί μία φορά, θα κλείσει:

Πατήστε ξανά, θα ανοίξει.



ON/OFF

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση περιστροφής.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε μη ειδικές περιοχές.



DR (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της στροφής

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε πολλούς τομείς. Μπορείτε να κάνετε μασάζ σε πολλές περιοχές.

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ

1. Βελτιώστε την ποιότητα του ύπνου
2. Το μασάζ μπορεί να κάνει το σώμα να χαλαρώσει, να εξαφανίσει την κούραση και να ανακουφίσει την πίεση.
3. Βελτιώνει τη λειτουργία του σώματος
Το μασάζ μπορεί να προωθήσει την κυκλοφορία του αίματος για το σώμα για να παρέχει θρεπτικά συστατικά, να βελτιώσει την λεμφική αποτοξίνωση, να χαλαρώσει τους μύες για να διατηρήσει την ισορροπία του γιν και του γιανγκ.
4. Κατάσταση γαστρεντερικής λειτουργίας
Το μασάζ μπορεί να βελτιώσει τη γαστρεντερική λειτουργία, να βελτιώσει την πέψη.

Βοηθά την πέψη, ανακουφίζει από τη δυσκοιλιότητα και άλλες δυσμενείς γαστρεντερικές καταστάσεις

Μασάζ λαιμού και ώμων

Η νέα σχεδίαση, σφίγγει σταθερά κάθε θέση.

Αποκλειστικός τρόπος για να κάνετε μασάζ

Εγκαταλείψτε το παραδοσιακό μασάζ και περιποιηθείτε τον εαυτό σας με ένα βαθύ μασάζ στον αυχένα.

Οι σφαίρες κάνουν μασάζ προς τα πάνω ή προς τα κάτω, σας αφήνουν να νιώσετε χαλαροί.

Λειτουργία θέρμανσης

Η λειτουργία ζεστού θα σας δώσει μια ζεστή αίσθηση ενώ απολαμβάνετε ένα αποτελεσματικό μασάζ.

Χρήση στο σπίτι και στο αυτοκίνητο

Εξοπλισμένο με εξωτερικό προσαρμογέα, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε χρησιμοποιώντας τροφοδοτικό οχήματος (12V).

Μπορείτε να απολαύσετε την άνεση ενός μασάζ οπουδήποτε.

ΧΡΗΣΗ



Πρέπει να τροφοδοτηθεί με τον μετασχηματιστή (DC 12V 2A) ή να επιβεβαιώσετε την ονομαστική τάση και μετά να το χρησιμοποιήσετε.

Βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα και ο μετασχηματιστής βρίσκονται σε σωστή επαφή. Μην τραβάτε τη σύνδεση με δύναμη, η κακή σύνδεση του μετασχηματιστή θα προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας του προϊόντος.

Μην το χρησιμοποιείτε στο μπάνιο και σε υγρά περιβάλλοντα.

Μην τοποθετείτε το προϊόν σε στερεές επιφάνειες για χρήση, διαφορετικά θα καταστραφεί.

Το προϊόν θερμαίνεται επιφανειακά, τα άτομα που είναι ευαίσθητα θα πρέπει να είναι προσεκτικά.

Εάν το προϊόν είναι κατεστραμμένο, μην το χειρίζεστε μόνοι σας.

Ανακοπή

Για να αποφύγετε πυρκαγιά, εγκαύματα, ηλεκτροπληξία ή άλλο κίνδυνο τραυματισμού, τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1) Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε το από την πρίζα.

Επίσης, όταν είναι εκτός χρήσης ή όταν το ανοίξετε, πρέπει να βγάλετε το φως.

2) Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, μη χρησιμοποιείτε μαξιλάρια ή κουβέρτες κατά τη λειτουργία.

3) Εάν το προϊόν βρίσκεται κοντά σε παιδιά και άτομα με σωματικές αναπηρίες, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο.

4) Χρησιμοποιήστε το τηρώντας τις υποδείξεις του εγχειριδίου.

Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα κατασκευής που δεν συνιστώνται από άλλο κατασκευαστή.

Κίνδυνος

Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Επόμενες οδηγίες:

1) Μετά τη χρήση ή πριν από τον καθαρισμό του προϊόντος, τραβήξτε το φως από την πρίζα.

2) Εάν το προϊόν πέσει στο νερό, μην αγγίζετε το βρεγμένο προϊόν. Πρέπει να το αποσυνδέσετε από την πρίζα.

3) Μην φοράτε το προϊόν όταν κάνετε ντους ή μπάνιο.

4) Μην βάζετε το προϊόν σε νερό ή άλλο υγρό.