

cecotec

CEC-04315



Συσκευή Καθαρισμού Στόματος Cecotec Bamba
ToothCare 1200 Jet Pro

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:

Μην κοιτάτε απευθείας την υπεριώδη ακτινοβολία.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη.

Αποσυνδέστε το φις όταν δεν χρησιμοποιείται.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις της είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού δυσλειτουργήσει ή έχει υποστεί βλάβη πέσει ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν άμεσα!

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη φυσική κατάσταση, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώση εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Καθάρισμα και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με κρύο ή ζεστό νερό ή συγκεκριμένες λύσεις.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ταιριάζει με την τάση αναφέρεται στην ετικέτα χαρακτηρισμού της συσκευής και ότι η Η πρίζα τοίχου είναι γειωμένη.

Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον επίσημο Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec προς αποφυγή κάθε είδους κίνδυνος.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο, το βύσμα ή το σώμα του παρουσιάζουν ορατές ζημιές, δεν λειτουργούν σωστά ή έχουν έχει πέσει.

Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν όχι σε χρήση, πριν το μεταφέρετε σε νέα θέση και πριν συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση και πριν τον καθαρισμό του.

Για να αποφύγετε την ανατροπή, τυλίξτε το καλώδιο με ασφάλεια.

Μην κατευθύνετε νερό κάτω από τη γλώσσα, το αυτί, τη μύτη ή άλλο ευαίσθητες περιοχές. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει πιέσεις που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε αυτές τις περιοχές. Ανάγνωση αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για σωστή λειτουργία.

Μην το χρησιμοποιείτε εάν φοράτε στοματικά κοσμήματα, αφαιρέστε πριν το χρησιμοποιήσετε.

Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχετε ανοιχτή πληγή στο στόμα σας ή γλώσσα. Εάν σας έχει συμβουλευτεί ο γιατρός σας να λάβει αντιβιοτική προ-φαρμακευτική αγωγή πριν από την οδοντιατρική διαδικασίες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας πριν χρησιμοποιώντας αυτό το όργανο ή οποιοδήποτε άλλο βοήθημα στοματικής υγιεινής. Μην τραβάτε το καλώδιο ούτε το χρησιμοποιείτε για μεταφορά, μην το χρησιμοποιείτε ως λαβή, μην κλείνετε μια πόρτα πάνω από το καλώδιο ούτε τραβάτε το γύρω από τις άκρες ή τις αιχμηρές γωνίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω από το κορδόνι. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας. Τραβήξτε από το φις, όχι το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε. Μην

χειριστείτε το καλώδιο ή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
Απενεργοποιήστε το προϊόν πριν το αποσυνδέσετε.
Αποσυνδέστε το ποτιστικό πριν καθαρίσετε τη συσκευή.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην λειτουργούν σε εξωτερικούς χώρους. Μην χρησιμοποιείτε το ποτιστικό κατά τόπους όπου χρησιμοποιείται οξυγόνο ή αερολύματα.
Ένα φυσιολογικό φαινόμενο που προκαλεί αιμορραγία των ούλων είναι χρήση οδοντικού ποτίσματος για πρώτη φορά. Θα εξαρτώνται από τα ούλα διαφορετική ικανότητα στήριξης.
Αποθηκεύστε τη συσκευή και το εγχειρίδιο οδηγιών της σε χρηματοκιβώτιο και στεγνό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται.

Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε το προϊόν σε μέρος όπου βρίσκεται μπορεί να πέσει ή να συρθεί σε μπανιέρα, ντους ή νεροχύτη.
Μην βυθίζετε σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην χρησιμοποιείτε το ενώ κάνετε ντους.

Μην πιάνετε μια συσκευή που έχει πέσει μέσα νερό, αποσυνδέστε αμέσως.

Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν παρέχονται από την Cecotec. Χρήση μόνο τα ακόλουθα εξαρτήματα: υψηλή πίεση κανονική ακροφύσιο, προδοντικό ακροφύσιο, ακροφύσιο με νάρθηκες, οδοντική πλάκα ακροφύσιο και ακροφύσιο καθαρισμού γλώσσας. Γεμίστε τη δεξαμενή μόνο με νερό ή άλλα συνιστώμενα πόσιμα διαλύματα.

Παραδοσιακός καθαρισμός

Το παραδοσιακό βούρτσισμα των δοντιών δεν μπορεί να φτάσει εύκολα αόρατα υπολείμματα τροφών και επιβλαβή βακτήρια. Εικ. 1

Το Floss έχει περιορισμένη πρόσβαση κάτω από τη γραμμή των ούλων. Εικ. 2

Ποτιστικό στόματος

Αφαιρέστε τα παγιδευμένα υπολείμματα τροφών και τα επιβλαβή βακτήρια με το ποτιστικό. Εικ. 3

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά προϊόντα, ειδικά παρουσία των παιδιών, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 4

1. Δεξαμενή
2. Απολύμανση UV φως
3. 7 μπεκ
4. Κλειδαριά ασφαλείας
5. Κάλυμμα δεξαμενής
6. Περιστροφικό ακροφύσιο 360°
7. Πόμολο λαβής
8. Κουμπί απελευθέρωσης ακροφυσίου
9. Κουμπί παύσης
10. Κουμπί UV/ON/OFF
11. Κουμπί ελέγχου πίεσης με 10 ρυθμίσεις πίεσης

Εικ. 5

- A. Κανονικό ακροφύσιο υψηλής πίεσης x3
- B. Περιοδοντικό ακροφύσιο x1
- Γ. Σιδεράκια ακροφύσιο x1
- Δ. Ακροφύσιο οδοντικής πλάκας x1
- Ε. Ακροφύσιο καθαριστικού γλώσσας x1

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία της και αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας.
- Ελέγξτε προσεκτικά εάν υπάρχει ζημιά. Εάν υπάρχει, ειδοποιήστε αμέσως το Τεχνικό Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec.

Περιεχόμενα κουτιού:

- Στοματικό αρδευτικό Bamba ToothCare 1200 Jet Pro
- 7 ακροφύσια
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

απολύμανση UV

Χρησιμοποιήστε το απολυμαντικό φως UV για να καθαρίσετε τα ακροφύσια μετά από κάθε χρήση. Αυτό το σύστημα παρέχει ελεγχόμενη απολύμανση.

Έχει ελεγχθεί ότι αφαιρεί το 99,9% των βακτηρίων και των ιών.

Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα απολύμανσης, κλείστε την πόρτα του διαμερίσματος των ακροφυσίων και ενεργοποιήστε το UV/ON/

Κουμπί OFF στη θέση UV.

Η λυχνία UV θα ανάψει μόνο εάν η πόρτα είναι καλά κλειστή. Το φως θα σβήσει εάν η πόρτα είναι

ανοιχτό κατά τη διάρκεια του κύκλου απολύμανσης. Όταν το κλείσετε ξανά, ο κύκλος θα ξεκινήσει ξανά.

Ο κύκλος απολύμανσης λειτουργεί για 15 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον κύκλο απολύμανσης εάν η λυχνία UV είναι αναμμένη όταν η πόρτα είναι ανοιχτή ή εάν η πόρτα είναι ανοιχτή

σπασμένος. Η υπερϊώδης ακτινοβολία μπορεί να είναι επιβλαβής για το ανθρώπινο μάτι και το δέρμα.

Προετοιμασία της δεξαμενής

Αφαιρέστε τη δεξαμενή από τη βάση. Ανοίξτε το κάλυμμα και γεμίστε το δοχείο νερού με ζεστό νερό.

Τοποθετήστε ξανά τη δεξαμενή στη βάση, πιέστε σταθερά και κλείστε το κάλυμμα.

Το κάλυμμα της δεξαμενής μπορεί να αφαιρεθεί εντελώς για να είναι εύκολος ο καθαρισμός του.

Τοποθέτηση και αφαίρεση ακροφυσίων Εικ. 6

Εισαγάγετε το ακροφύσιο στο κέντρο του πόμολο στο πάνω μέρος της λαβής και πιέστε το μέχρι να το κάνει κλικ. Όταν κάνει κλικ, θα δείτε το κουμπί να χαμηλώνει και να παραμένει σταθερό σε αυτή τη θέση. Το χρώμα ο δακτύλιος θα αγγίζει σχεδόν το άκρο του πόμολο εάν το ακροφύσιο είναι σωστά φραγμένο στη θέση του.

Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο από τη λαβή, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του ακροφυσίου και αφαιρέστε το ακροφύσιο πόμολο λαβής.

Ρύθμιση πίεσης

Γυρίστε το κουμπί ελέγχου πίεσης στη χαμηλότερη θέση για την πρώτη χρήση. Αυξήστε την πίεση σταδιακά με την πάροδο του χρόνου μέχρι την επιθυμητή ρύθμιση ή σύμφωνα με τις οδηγίες του οδοντιάτρου σας.

Χρήση λειτουργίας

Επιλέξτε το ακροφύσιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τοποθετήστε το όπως υποδείχθηκε προηγουμένως.

Συνδέστε το βύσμα σε τροφοδοτικό.

Σκύψτε πάνω από τον νεροχύτη και τοποθετήστε το ακροφύσιο στο στόμα σας. Κλείστε ελαφρώς τα χείλη σας για να το αποφύγετε

πιτσιλιές, αλλά αφήστε το νερό να ρέει από το στόμα σας στον νεροχύτη.

Στρέψτε το ακροφύσιο στα δόντια σας και με το ελεύθερο χέρι σας, γυρίστε το διακόπτη UV/OFF/ON στο ON θέση.

Ρυθμίστε την πίεση με το κουμπί ελέγχου πίεσης και την κατεύθυνση της δέσμης γυρίζοντας το κουμπί σε λειτουργία το χερούλι. Εικ. 7

Κατευθύνετε τη δέσμη νερού σε γωνία 90° προς την τσίχλα.

Για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα, ξεκινήστε από την περιοχή των γομφίων προς τα μπροστινά δόντια. Εικ. 8

Σύρετε το ακροφύσιο πάνω από τη γραμμή των ούλων και σταματήστε ανάμεσα στα δόντια σας.

Διατηρήστε τη διαδικασία μέχρι να είναι καθαρή κάθε περιοχή γύρω και ανάμεσα στα δόντια.

Παύση/Έλεγχος

Μπορείτε να σταματήσετε το νερό προσωρινά ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί Παύση στη λαβή. Εικ. 9

Όταν τελειώσετε, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη μονάδα τοποθετώντας το κουμπί

UV/OFF/ON στη θέση OFF

και αδειάζοντας το υπόλοιπο υγρό στη δεξαμενή. Αποσυνδέστε τη μονάδα.

Περιοδοντικό ακροφύσιο Εικ. 10

Το περιοδοντικό ακροφύσιο απελευθερώνει νερό και αντιβακτηριδιακό διάλυμα στους περιοδοντικούς θύλακες.

Είναι σχεδιασμένο να φτάνει στις βαθύτερες περιοχές της περιοδοντικής κοιλότητας.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το ακροφύσιο, σκύψτε πάνω από τον νεροχύτη και τοποθετήστε το ακροφύσιο προσεκτικά κάτω από τη γραμμή των ούλων, σε γωνία 45° γωνία. Ενεργοποιήστε τη μονάδα με τη χαμηλότερη ρύθμιση πίεσης και καθαρίστε τη γραμμή των ούλων εισάγοντας

το ακροφύσιο ανάμεσα στα δόντια σας. Συνεχίστε πάνω από τη γραμμή των ούλων μέχρι να ολοκληρώσετε τον καθαρισμό.

Σιδεράκια ακροφύσιο Εικ. 11

Το ειδικό ακροφύσιο για σιδεράκια είναι αποκλειστικά σχεδιασμένο για να βουρτσίζει και να ξεπλένει ταυτόχρονα

δυσπρόσιτες περιοχές γύρω από νάρθηκες και άλλες οδοντιατρικές εργασίες.

Για να χρησιμοποιήσετε το ακροφύσιο με τιράντες, σκύψτε πάνω από το νεροχύτη και χρησιμοποιήστε τις τρίχες για να καθαρίσετε ελαφρώς γύρω από το τιράντες, το νερό θα ρέει μέσα από τη βούρτσα για να ξεπλυθεί.

Ακροφύσιο καθαριστικού γλώσσας Εικ. 12

Σκύψτε πάνω από το νεροχύτη, τοποθετήστε αυτό το ακροφύσιο πάνω από τη γλώσσα σας και ενεργοποιήστε τη μονάδα με το χαμηλότερο ρύθμιση πίεσης. Αυξήστε το εάν χρειάζεται. Τοποθετήστε το ακροφύσιο στο κέντρο της γλώσσας σας και σύρετέ το προς τα εμπρός ασκώντας ελαφρά πίεση.

Ακροφύσιο οδοντικής πλάκας Εικ. 13

Κατευθύνετε το πίδακα σε γωνία 90° στη γραμμή των ούλων, κλείστε ελαφρά τα χείλη σας για να αποφύγετε πιτσιλίσματα, αλλά αφήστε το νερό να ρέει ελεύθερα από το στόμα σας στον νεροχύτη. Ξεκινήστε από την περιοχή των γομφίων (πίσω δόντια) και συνεχίστε προς τα μπροστινά δόντια, τοποθετήστε το ακροφύσιο κοντά στα δόντια σας, ώστε οι τρίχες να εφάπτονται απαλά. Σύρετε απαλά το ακροφύσιο κατά μήκος της γραμμής των ούλων, περνώντας για λίγο ανάμεσα στα δόντια για να τα βουρτσίσετε απαλά και αφήστε το νερό να κυλήσει ανάμεσα στα δόντια σας. Συνεχίστε μέχρι όλες τις περιοχές γύρω και μεταξύ των δοντιών έχουν καθαριστεί, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, πάνω και κάτω.

Χρησιμοποιώντας άλλες λύσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στοματικά διαλύματα και αντιβακτηριδιακά διαλύματα που προορίζονται για αυτό το σκοπό, πληρώνοντας ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό.

Για να αποφύγετε το φράξιμο του ποτίσματος μετά τη χρήση των διαλυμάτων, θα πρέπει να το ξεπλύνετε ως εξής: γεμίστε το δεξαμενή μερικώς με ζεστό νερό και λειτουργήστε τη συσκευή με το ακροφύσιο να δείχνει προς το μέρος βυθιστείτε μέχρι να αδειάσει η δεξαμενή.

Να τελειώσω

Κλείστε το ποτιστικό και αδειάστε τελείως το υγρό που έχει μείνει στη δεξαμενή.

Εάν χρησιμοποιείτε ειδικά διαλύματα, καθαρίστε και ξεπλύνετε καλά τη δεξαμενή.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθάρισμα

Πριν το καθαρίσετε, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το ποτιστικό.

Αφού χρησιμοποιήσετε ειδικά διαλύματα στη δεξαμενή, ξεπλύνετε καλά τη μονάδα.

Μετά από κάθε χρήση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φως UV για να απολυμάνετε τα ακροφύσια όπως εξηγήθηκε παραπάνω.

Γεμίστε τη μισή δεξαμενή με ζεστό νερό βρύσης, με το ακροφύσιο στραμμένο προς το νεροχύτη, γυρίστε τη μονάδα

ενεργοποιήστε και αφήστε το να λειτουργήσει μέχρι να αδειάσει η δεξαμενή, αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε το φράξιμο του ακροφυσίου και

βοηθήστε τη μονάδα σας να διαρκέσει περισσότερο.

Καθαρίστε το προϊόν, εάν χρειάζεται, με ένα μαλακό πανί και ένα μαλακό μη λειαντικό καθαριστικό.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν την καθαρίσετε.

Συντήρηση και επισκευή

Αφού καθαρίσετε το στοματικό ποτιστικό, τοποθετήστε το δοχείο ανάποδα σε μια επίπεδη επιφάνεια για να βεβαιωθείτε

στεγνώνει τελείως. Όταν στεγνώσει τελείως, τοποθετήστε το ξανά στο σώμα, επίσης καθαρό και στεγνό.

Πρέπει να το τοποθετήσετε στο αρχικό κουτί ή σε παρόμοιο όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για πολύ χρόνο.

Εάν το ρομπότ δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε το προϊόν. Εάν αυτό προκαλεί προβλήματα με το προϊόν, η εγγύηση δεν το καλύπτει

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Bamba ToothCare 1200 Jet Pro

Αναφορά προϊόντος: 04315

Ισχύς: 18 W

Τάση και συχνότητα: 100-240 V~, 50/60 Hz

IPX4

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

Ο εξοπλισμός (ΑΗΗΕ) καθορίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μην απορρίπτεται μαζί με τα κανονικά αδιαχώριστα αστικά απορρίμματα.

Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση

και την ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και μειώνουν τις επιπτώσεις στον άνθρωπο υγεία και το περιβάλλον. Το σύμβολο του διαγραμμένου "τροχοφόρου κάδου" στο το προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε σωστά τη συσκευή.

Εάν το προϊόν έχει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από το

συσκευή και απορρίπτεται κατάλληλα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή

πωλητή λιανικής για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, όσο η απόδειξη

της αγοράς έχει υποβληθεί, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει δοθεί σωστή χρήση, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που προορίζονται για αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί κατάχρηση,

χτυπημένο, εκτεθειμένο στην υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και σε οποιαδήποτε

άλλο σφάλμα που αποδίδεται στον πελάτη.

- Εάν το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από

την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

- Βλάβες που προέρχονται από τη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης.

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, με βάση

ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από τα αναλώσιμα μέρη. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μην το κάνετε
διστάσετε να επικοινωνήσετε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στη CECOTEC

INNOVACIONES, S.L. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν επιτρέπεται, στο σύνολό του ή

εν μέρει, να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε ένα σύστημα ανάκτησης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιοδήποτε μέσο

(ηλεκτρονικά, μηχανικά, φωτοαντιγραφικά, ηχογραφημένα ή παρόμοια) χωρίς την προηγούμενη άδεια του

CECOTEC INNOVACIONES, S.L.



Fig./Img./Abb./Afb./
Rys./Obr. 1



Fig./Img./Abb./Afb./
Rys./Obr. 2



Fig./Img./Abb./Afb./
Rys./Obr. 3

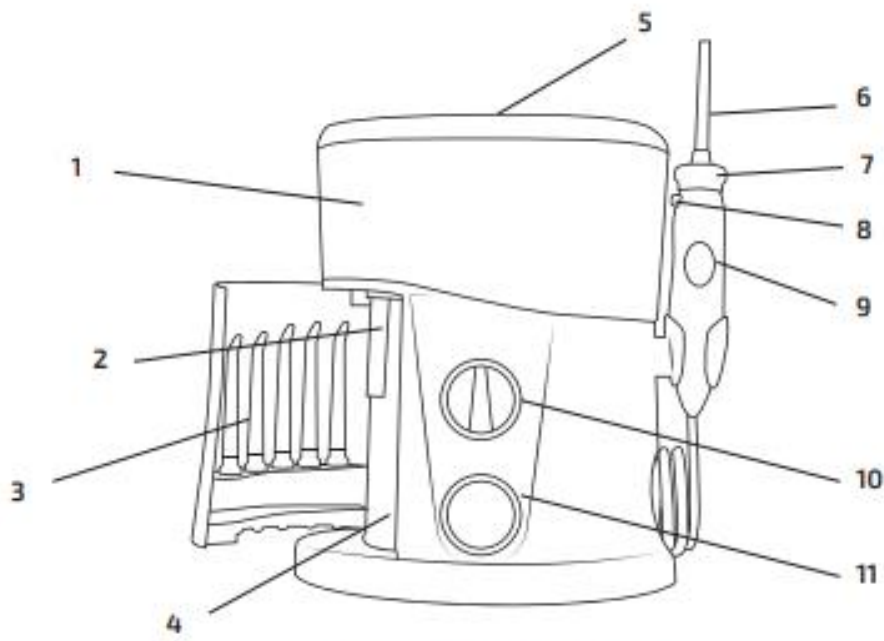


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 4

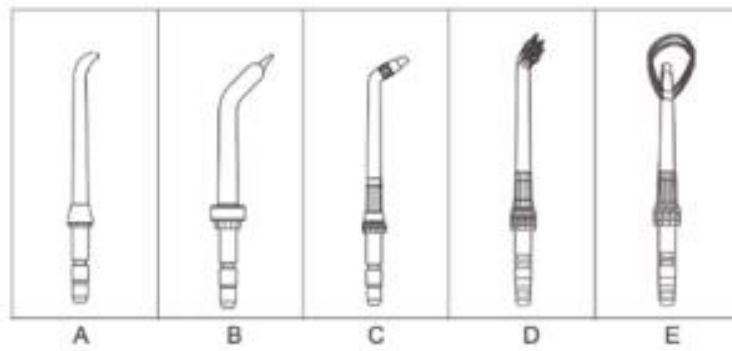


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 5

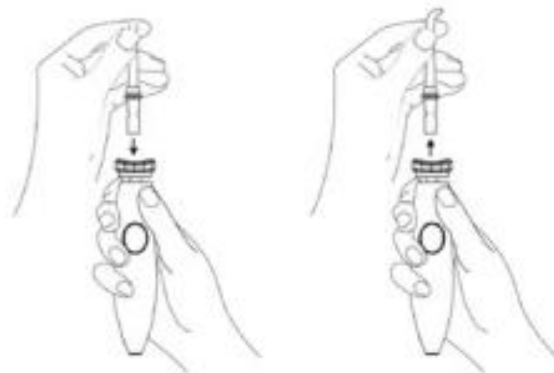


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 6

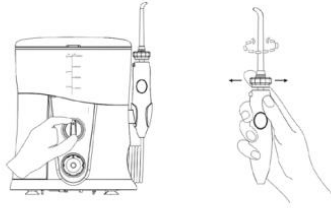


Fig./img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 7



Fig./img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 10

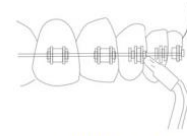


Fig./img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 11

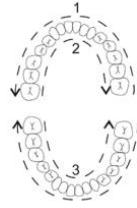


Fig./img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 8



Fig./img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 9

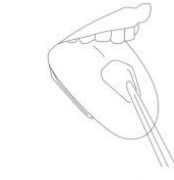


Fig./img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 12



Fig./img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 13