

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

**Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού ατόμων, θα πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, όπως:**

Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται σε αυτόν τον Οδηγό χρήσης. Χρησιμοποιείτε μόνο συνιστώμενα εξαρτήματα και ανταλλακτικά. Μην πραγματοποιείτε καμία συντήρηση εκτός από τις συνιστώμενες.

Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή συλλογιστικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες από υπεύθυνο άτομο.

Μην το χρησιμοποιείτε ως παιχνίδι. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε βρεγμένες επιφάνειες και μην εκθέτετε τον φορτιστή σε υγρασία, βροχή ή χιόνι.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν παρουσία εκρηκτικών ατμοσφαιρών (αέριες αναθυμιάσεις, σκόνη ή εύφλεκτα υλικά). Μπορεί να δημιουργηθούν σπινθήρες, προκαλώντας πιθανώς πυρκαγιά.

Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του φορτιστή είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να μην το πατήσετε, να σκοντάψετε ή να υποστεί με άλλον τρόπο ζημιά ή πίεση. Αντικαταστήστε αμέσως έναν κατεστραμμένο φορτιστή.

Μην βάζετε εμπόδια στις οπές εξαερισμού. Μην το χρησιμοποιείτε εάν υπάρχει φραγμός αερισμού. Διατηρήστε το απαλλαγμένο από σκόνη, χνούδια, τρίχες και στιδήποτε μπορεί να μειώσει τη ροή του αέρα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα χαλαρά ρούχα και τα δάχτυλα από αεραγωγούς και κινούμενα μέρη.

Μην αφήνετε ποτέ την εσωτερική μπαταρία να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή το στόμα.

Εάν μια κατεστραμμένη μπαταρία έχει διαρροή χημικών ουσιών, χρησιμοποιήστε γάντια από καουτσούκ ή νεοπρένιο για να την απορρίψετε.

Εάν το δέρμα εκτεθεί σε υγρά μπαταρίας, πλύνετε με σαπούνι και νερό και ξεπλύνετε με ξύδι.

Εάν τα μάτια εκτεθούν σε χημικά της μπαταρίας, ξεπλύνετε αμέσως με νερό για 20 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Αφαιρέστε και απορρίψτε τα μολυσμένα ρούχα.

· MHN λειτουργείτε κάτω από κουβέρτα και μαξιλάρι. Μπορεί να προκληθεί υπερβολική θέρμανση και να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

· Μην τοποθετείτε το προϊόν ή το φορτιστή σε σημείο που μπορεί να πέσει σε μπανιέρα ή νεροχύτη. Μην το τοποθετείτε και μην το ρίχνετε σε νερό ή άλλο υγρό. Μην πιάνετε μια συσκευή που έχει πέσει στο νερό. Αποσυνδέστε αμέσως.

· MHN αποσυρμολογείτε. Η αποσυρμολόγηση ή η εσφαλμένη επανασυρμολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή έκθεσης σε χημικά της μπαταρίας. Η εγγύηση θα ακυρωθεί εάν το προϊόν ή ο φορτιστής αποσυρμολογηθεί ή εάν έχουν αφαιρεθεί εξαρτήματα.

· Εάν η μπαταρία ή ο φορτιστής δεν λειτουργεί σωστά, έχει δεχθεί ένα απότομο χτύπημα, έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά, έχει μείνει σε εξωτερικό χώρο ή πέσει στο νερό, ΜΗ χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών για επισκευή ή σέρβις. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να αποσυρμολογήσετε το προϊόν που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

## Χαρακτηριστικά

- Χαμηλός θόρυβος
- 20 Επίπεδα Έντασης
- Κινητήρας υψηλής ροπής
- 6 κεφαλές μασάζ
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Ελαφρύ & Φορητό
- Ψηφιακή οθόνη


Είτε είστε αθλητής, είτε φυσιοθεραπευτής είτε άτομο που χρειάζεται ανακούφιση από την ένταση και τον πόνο, το Massage Gun παρέχει μια καινοτόμα, φυσική προσέγγιση για τη βελτίωση της σωματικής σας υγείας. Μπορεί να ανακουφίσει αποτελεσματικά τον πόνο που προκαλείται από τη συσσώρευση γαλακτικού οξέος μετά από έντονη άσκηση και να επιβραδύνει την ενόχληση των μυών όλων των ατόμων που κάθονται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το πιστόλι μασάζ βοηθά στα εξής:

Βελτιώνει τους μώλωπες, τα διαστρέμματα, τις καταπονήσεις και τους πόνους των μυών  
Αυξάνει την κυκλοφορία και τη λεμφική ροή  
Ανακουφίζει από μυϊκούς σπασμούς και δυσκαμψία  
Μειώνει τη συσσώρευση γαλακτικού οξέος στους μύες  
Ενεργοποιεί το νευρικό σύστημα και τους μύες  
Μυϊκή κόπωση, πόνος, σφίξιμο, πόνος και κόμποι  
Αυξάνει την κινητικότητα των αρθρώσεων  
Χαλάρωση και πάχυνση συνδετικού ιστού και περιτονίας

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 πιστόλι μασάζ xTaoTronics (Π-PCA004)
- 6 x κεφαλές μασάζ
- 1 x Μετασχηματιστής ρεύματος
- 1 x Ταξιδιωτική θήκη
- 1 x Οδηγός χρήσης
- 1 x ευχαριστήρια κάρτα

## Διάγραμμα προϊόντος

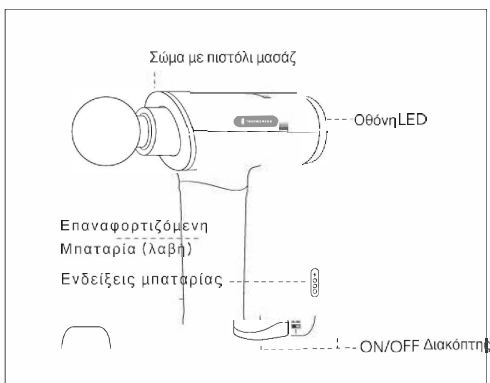

## Massage Heads

Σφαιρική Κεφαλή  
για μεγάλες μυϊκές ομάδες  
όπως μπράτσα, πλάτη,  
γοφούς, μηρούς, γάμπες  
κ.λπ.

Κεφαλή σφαιρική  
για εφαρμογή σε βιολίς  
ιππότες όπως αρθροσκόπος, ποδηλάτης και πάτοματς



Μαλακή κεφαλή Air  
Cushioning για ευαίσθητη  
χαλάρωση των μυών



Επίπεδη κεφαλή  
για μυϊκές ομάδες πλάτης



Κεφαλή σε σχήμα U  
για τον αυχένα, τη  
σπονδυλική στήλη και τον  
αχιλλέιο τένοντα




Κεφαλή σε σχήμα D  
για τους κοιλιακούς μύες

## Προδιαγραφές



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Μοντέλο                 | TT-PCA004            |
| Ισχύς                   | 42.6W                |
| Χωρητικότητα μπαταρίας  | 2600mAh              |
| Χρόνος φόρτισης         | 3 ώρες               |
| Ωρα εργασίας            | 3 - 10 ώρες          |
| Ρυθμιζόμενο επίπεδο     | 20 επίπεδα           |
| Συχνότητα               | 800 - 3200 rpm       |
| Επίπεδο θορύβου         | 35 - 53dB            |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10~40°C / 14~104°F  |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -25~60°C / -13~140°F |

## Λειτουργία ελέγχου

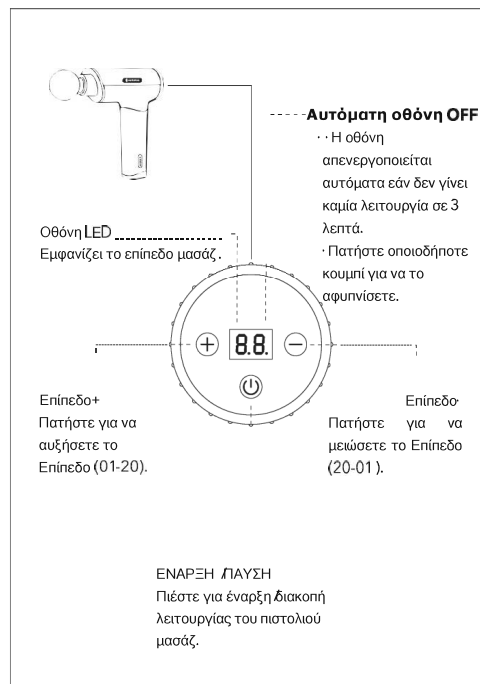


## Φόρτιση


Συνδέστε το πιστόλι μασάζ σε μια πηγή ρεύματος με το παρεχόμενο τροφοδοτικό. Η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα .

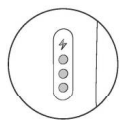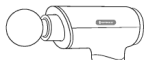

**Χαμηλή μπαταρία**  
4 Οι ενδείξεις αναβοσβήνουν

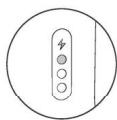

**Φόρτιση**  
Η αντίστοιχη ένδειξη αναβοσβήνει

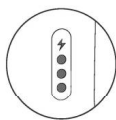

**Πλήρως φορτισμένο**  
Στερεά στο πράσινο


- Φορτίστε πλήρως το πιστόλι μασάζ πριν από την πρώτη χρήση.
- Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή μόλις φορτιστεί πλήρως.
- Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, φορτίστε αμέσως την μπαταρία.

## Χρησιμοποιώντας το πιστόλι μασάζ


ON OFF



1. Εναλλάξτε το ON/OFF  
Εναλλαγή σε **ON**.

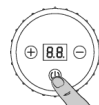

2. Πατήστε για να ξεκινήσει η εκτέλεση( Επίπεδο 01 ).

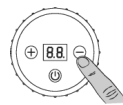

3. Πατήστε ή για προσαρμόστε στην επιθυμητή ένταση (Επίπεδο 01-20).



4. Πατήστε για να σταματήσει η λειτουργία μετά τη χρήση.



5. Θυμηθείτε να κάνετε εναλλαγή στο OFF μετά τη χρήση.

- Αντικαταστήστε την κεφαλή μασάζ όταν το πιστόλι μασάζ είναι απενεργοποιημένο.
- Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης Το πιστόλι μασάζ θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από συνεχή λειτουργία για 15 λεπτά.
- Λειτουργία αυτόματης προστασίας Όταν η κεφαλή μασάζ πιέζεται δυνατά για να σταματήσει ο κινητήρας, το πιστόλι μασάζ θα σταματήσει να λειτουργεί με την ένδειξη "E4". Επανεκκινήστε τη μονάδα ενεργοποιώντας την ξανά .
- Μην λειτουργείτε συνεχώς για περισσότερο από 1 ώρα και αφήστε τη συσκευή να ξεκουραστεί για 30 λεπτά πριν την επαναχρησιμοποίησετε .

## Troubleshooting

Όταν παρουσιαστεί οποιαδήποτε ανωμαλία για το πιστόλι μασάζ, θα εμφανιστεί ο αντίστοιχος κωδικός δυσλειτουργίας:

| Κωδικός δυσλειτουργίας | Πιθανή αιτία                             | Λύση   |
|------------------------|--|--|
| E1                     | Η μπαταρία είναι άδεια                   | Φορτίστε το πιστόλι μασάζ.   |
| E2                     | Μη φυσιολογικό σήμα ανίχνευσης μπαταρίας | Χρησιμοποιείτε μόνο την γνήσια μπαταρία.   |
| E3                     | Δεν εντοπίστηκε φορτίο                   | <ul style="list-style-type: none"><li>· Επανεκκινήστε το πιστόλι μασάζ.</li><li>· Εάν η επανεκκίνηση δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της Tao Tronics για αντικατάσταση.</li></ul> |
| E4                     | Προστασία από υπερένταση                 | <ul style="list-style-type: none"><li>· Επανεκκινήστε το πιστόλι μασάζ.</li><li>· Εάν η επανεκκίνηση δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της Tao Tronics για αντικατάσταση.</li></ul> |

## Καθαρισμός και Συντήρηση

· Φροντίστε να απενεργοποιήσετε το πιστόλι μασάζ πριν τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό πανί για να σκουπίσετε απαλά τις εξωτερικές επιφάνειες.  
ΜΗ βυθίζετε σε νερό, φυλάξτε το μακριά από υγρά ή πηγές θερμότητας.