

Εγχειρίδιο χρήστη


Ρυθμίστε το μέγεθος του καρπού σύμφωνα με την οπή ρύθμισης. πόρπη της ζώνης αγκράφα. Ο αισθητήρας πρέπει να διατηρείται κοντά στο δέρμα για να μην μετατοπιστεί.

Φορτίστε το βραχιόλι

Για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει κανονική χωρητικότητα. Εάν η τροφοδοσία δεν είναι κανονικά ενεργοποιημένη, συνδέστε το φορτιστή για να φορτίσετε τη συσκευή και το βραχιόλι θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή βραχιόλι στο τηλέφωνό σας

Σαρώστε τον κωδικό QR ή μεταβείτε στο App Store, κάντε λήψη της εφαρμογής και εγκαταστήστε την εφαρμογή

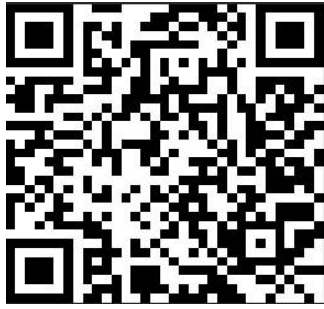

Android / IOS

Απαιτήσεις συστήματος: Android 5.0 ή νεότερη έκδοση. iOS 9.0 ή μεταγενέστερη έκδοση Υποστήριξη Bluetooth 4.0.

Σύνδεση της συσκευής

Την πρώτη φορά που πρέπει να συνδεθείτε στην εφαρμογή βαθμονόμησης. Μετά την επιτυχία

Μόλις συνδεθεί, το βραχιόλι θα συγχρονίσει αυτόματα την ώρα.

Ανοίξτε την εφαρμογή τηλεφώνου → κάντε κλικ για να ξεκινήσετε τη σάρωση → κάντε κλικ για να συνδεθείτε στη συσκευή

Μετά την επιτυχή σύζευξη, ο τόνος εφαρμογής θα αποθηκεύσει αυτόματα τη διεύθυνση Bluetooth του βραχιολιού και όταν η εφαρμογή είναι ανοιχτή ή εκτελείται στο παρασκήνιο, θα αναζητήσει και θα συνδέσει αυτόματα το βραχιόλι.

Κινητό τηλέφωνο Android βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή εκτελείται στο παρασκήνιο και ότι στις ρυθμίσεις του συστήματος κινητής τηλεφωνίας σας παρέχονται όλα τα δικαιώματα, όπως η εκκίνηση του φόντου και η ανάγνωση πληροφοριών επαφής.

Περιγραφή των λειτουργιών του βραχιολιού

- Αφού απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή
Στη διεπαφή Bluetooth στο βραχιόλι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη 2 δευτερολέπτων για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Ένα σύντομο πάτημα θα κλείσει τη σελίδα κλεισίματος
Συσκευή επαναφοράς βραχιολιών, αυτή η λειτουργία θα διαγράψει όλα τα δεδομένα στο βραχιόλι (π.χ. μέτρηση βημάτων)

Στην κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε την οθόνη

| Είναι η προεπιλεγμένη σελίδα ρολογιού βραχιολιού, πατήστε σύντομα το πλήκτρο λειτουργίας για εναλλαγή για εμφάνιση διαφορετικών σελίδων, δεν υπάρχει προεπιλεγμένη λειτουργία οθόνης πέντε δευτερολέπτων

| Εναλλαγή σε διεπαφή καρδιακού ρυθμού τρία σε ένα για να ξεκινήσει η δοκιμή,

Διεπαφή ρολογιού

Μετά το συγχρονισμό με το τηλέφωνο, το βραχιόλι βαθμονομεί αυτόματα την ώρα.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα της διεπαφής αναμονής για εναλλαγή της διεπαφής ρολογιού 24/12 ωρών.

(διαδρομές βημάτων) Αριθμός βημάτων

Φορέστε το βραχιόλι και σημειώστε τον αριθμό των καθημερινών βημάτων που κάνετε για να δείτε τα τρέχοντά σας βήματα σε πραγματικό χρόνο.

Βοήθεια

Η απόσταση κίνησης υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των βημάτων περπατήματος. Θερμίδες

Υπολογίστε τις θερμίδες που καίγονται με βάση τον αριθμό των βημάτων περπατήματος

Καρδιακός ρυθμός, αρτηριακή πίεση, οξυγόνο στο αίμα τρία σε ένα

Αφού εισαγάγετε τη δοκιμή καρδιακού ρυθμού σε τρία σε λίγα δευτερόλεπτα, τα τρέχοντα αποτελέσματα του καρδιακού ρυθμού, της αρτηριακής πίεσης και του οξυγόνου αίματος εμφανίζονται σε μία διεπαφή δοκιμής. Αυτό το χαρακτηριστικό απαιτεί το λουράκι για τη λειτουργία των αισθητήρων καρδιακού ρυθμού και αρτηριακής πίεσης

Λειτουργία πολλαπλών σπορ

(Τρόπος λειτουργίας)

Σε αυτήν τη διεπαφή, οι θερμίδες και η διάρκεια της δραστηριότητας μπορούν να καταγραφούν.

(Μετάβαση σε λειτουργία σχοιγιού)

Σε αυτήν τη διεπαφή, μπορούν να καταγραφούν οι θερμίδες και η διάρκεια του άλματος σχοιγιού.

(Λειτουργία Sit-up)

Σε αυτήν τη διεπαφή, μπορείτε να καταγράψετε τις θερμίδες και τη διάρκεια που είστε όρθιοι.

(Κατάσταση ύπνου)

Όταν αποκοιμηθείτε, το βραχιόλι θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία παρακολούθησης ύπνου. Ανιχνεύει αυτόματα τον βαθύ ύπνο / ρηχό ύπνο και υπολογίζει την ποιότητα ύπνου. Τα δεδομένα ύπνου υποστηρίζονται μόνο εάν παρακολουθείτε την εφαρμογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση βραχιολιού ύπνου θα έχει δεδομένα ύπνου και θα ξεκινήσει την ανίχνευση ύπνου στις 10 μ.μ. Τα δεδομένα ύπνου (3/4 ωρών ύπνου) θα συγχρονιστούν με το APP ενώ κοιμάστε.

Λειτουργία πληροφοριών

Όταν το βραχιόλι ωθεί πολλά μηνύματα υπενθύμισης, εισαγάγετε αυτήν τη διεπαφή για να δείτε τις τελευταίες 3 εγγραφές μηνυμάτων. APP, λειτουργία και ρυθμίσεις

(Προσωπικές πληροφορίες)

Παρακαλώ ορίστε τα προσωπικά σας στοιχεία αφού εισαγάγετε την αίτηση.

Ρυθμίσεις → προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να ορίσετε το φύλο-ηλικία-ύψος-βάρος

Μπορείτε επίσης να ορίσετε καθημερινά βήματα για παρακολούθηση

(Τύπος εφαρμογής)

εισερχόμενη κλήση:

Σε συνδεδεμένη κατάσταση, εάν η λειτουργία ειδοποίησης κλήσης είναι ενεργοποιημένη, όταν πραγματοποιείται μια κλήση, το λουράκι θα δονείται και θα εμφανίζει το όνομα ή τον αριθμό του καλούντος.

(Πρέπει να δώσετε στην εφαρμογή άδεια ανάγνωσης βιβλίου διευθύνσεων)

Ειδοποίηση SMS:

Στη συνδεδεμένη κατάσταση, εάν η λειτουργία υπενθύμισης SMS είναι ενεργοποιημένη, το βραχιόλι θα δονείται όταν υπάρχει μήνυμα κειμένου.

Άλλες υπενθυμίσεις:

Στη συνδεδεμένη κατάσταση, εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη όταν υπάρχει μήνυμα όπως WeChat, QQ, Facebook κ.λπ., το βραχιόλι θα δονείται για να υπενθυμίζει και να εμφανίζει το περιεχόμενο

παραλήφθηκε από την εφαρμογή. (Μπορείτε επίσης να δείτε τις τρεις τελευταίες εγγραφές μηνυμάτων στις πληροφορίες κουδουνίσματος στο μενού.) (Πρέπει να δώσετε στην εφαρμογή άδεια για τη λήψη ειδοποιήσεων συστήματος. Το λουράκι μπορεί να εμφανίζει 20-40 λέξεις).

Αλλα χαρακτηριστικά:

Ενεργοποιήστε τη δόνηση για να ορίσετε αυτήν τη λειτουργία, όταν υπάρχει κλήση, μήνυμα ή άλλη υπενθύμιση, το βραχιόλι θα δονείται.

Αν είναι κλειστό, το βραχιόλι θα έχει μόνο μια υπενθύμιση της οθόνης χωρίς να ανακινείται, για να αποφευχθεί η παρέμβαση.

Συμβουλές για χρήστες Android:

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία υπενθύμισης, ορίστε να επιτρέπει στο "Fitpro" να τρέχει στο παρασκήνιο. συνιστάται η προσθήκη

"fitpro" για διαχείριση δικαιωμάτων και άνοιγμα όλων των αδειών.
(Ρύθμιση ξυπνητηριού)

8 ξυπνητήρια μπορούν να ρυθμιστούν στη συνδεδεμένη κατάσταση.

Μόλις οριστεί, θα συγχρονιστεί με το βραχιόλι. υποστηρίζεται ξυπνητήρι εκτός σύνδεσης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του συγχρονισμού, ακόμα και αν η εφαρμογή δεν είναι συνδεδεμένη, το βραχιόλι θα υπενθυμιστεί σύμφωνα με τον καθορισμένο χρόνο.

(Αναζήτηση βραχιολιού)

Σε συνδεδεμένη κατάσταση, κάντε κλικ στο "Αναζήτηση βραχιολιού" και το βραχιόλι θα δονείται.

(Απομακρυσμένη φωτογραφία)

Στη συνδεδεμένη κατάσταση, ξεκινήστε την εικόνα του βραχιολιού ή το APP για είσοδο

απομακρυσμένη διεπαφή κάμερας, ανακινήστε / γυρίστε τον καρπό / αγγίξτε το βραχιόλι και τραβήξτε αυτόματα μια φωτογραφία μετά από 3 δευτερόλεπτα αντίστροφης μέτρησης.

Επιτρέψτε στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στο άλμπουμ φωτογραφιών σας και αποθηκεύστε τη φωτογραφία σας.

(Καθιστική υπενθύμιση)

Ρυθμίστε αν θα ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθιστικής υπενθύμισης, μπορείτε να ορίσετε το διάστημα υπενθύμισης, εάν καθίσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ρυθμιζόμενο χρόνο, το βραχιόλι θα σας το υπενθυμίσει.

(Σηκώστε το χέρι σας για τοπ φωτισμό)

Ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία. Όταν το λουράκι είναι σε κατάσταση οθόνης, σηκώστε τον καρπό σας και γυρίστε την οθόνη προς εσάς για να φωτίσετε την οθόνη.

(λειτουργία -μην ενοχλείτε)

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Μην ενοχλείτε. Μπορείτε να ορίσετε μια χρονική περίοδο για τη λειτουργία Μην ενοχλείτε. Μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, το βραχιόλι σταματά να λαμβάνει μηνύματα ειδοποίησης για να αποφύγει την υπενθύμιση μηνυμάτων.

(Επαναφορά της συσκευής)

Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα από το βραχιόλι (π.χ. μέτρηση βημάτων)

(Αφαίρεση της συσκευής)

Διαγραφή συσκευής Αυτή η λειτουργία θα διαγράψει τα δεδομένα και θα διαγράψει τη συσκευή

Βασικές παράμετροι:

εύρος συχνοτήτων: 2.400-2.485 GHz

μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 10 dBm