

LX-032



Επαναφορτιζόμενο Ωτοσκόπιο 3.9 mm με Κάμερα
Lifenaxx

Η Δήλωση συμμόρφωσης για αυτήν τη συσκευή βρίσκεται στον σύνδεσμο Διαδικτύου: www.technaxx.de/ (στην κάτω γραμμή "Konformitätserklärung"). Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

την πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης. Τηλέφωνο σέρβις για τεχνικό υποστήριξη: 01805 012643 (14 σεντ/λεπτό από σταθερή γραμμή Γερμανίας και 42 σεντ/λεπτό

από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας).

Δωρεάν email: support@technaxx.de

Φυλάξτε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη για μελλοντική αναφορά ή κοινή χρήση προϊόντων. Κάντε το ίδιο

με τα γνήσια αξεσουάρ για αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση εγγύησης, επικοινωνήστε με το αντιπρόσωπο ή το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.

Εγγύηση 2 χρόνια

Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση σε ανθρώπους και ζώα. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για τον καθαρισμό και τον έλεγχο του ακουστικού πόρου ή της ρινικής κοιλότητας.

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι δεν εισχωρείτε πολύ βαθιά στα ανοίγματα, μπορεί να προκαλέσετε ζημιά.

Χαρακτηριστικά






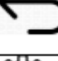


- Κάμερα CMOS 3MP.
- Ανάλυση 1920 x 1080P 30FPS.
- Γυροσκοπίου 6 Άξονα
- Απόσταση εστίασης 1,5-2cm
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

Τεχνικές προδιαγραφές

USB (φορτίο σε ξηρό κατάσταση μόνο)	5V max. 0,2 A
Μπαταρία	3,7 V / 250mAh
Μηχανή	3MP 1920x1080 30FPS
Χρόνος απασχόλησης	60 λεπτά.
Χρόνος φόρτωσης	90 λεπτά.
WLAN	Διαβίβαση της απόστασης ~8m (ανοικτός χώρος) Ζώνη συχνότητας 2.4 GHz Ακτινοβολούμενη ισχύς μετάδοσης μέγιστη. 20mW
ΟΔΗΓΗΣΕΙ	6
Διάμετρος του φακού	3,9 χιλ.
Διάσταση	Ø1. 3x 14cm
Βάρος	17ζ

Πρώτη χρήση

- Φορτώστε πλήρως τη συσκευή με το καλώδιο USB, αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 90 λεπτά.
- Ανοιχτό αποθηκεύστε το APP και αναζητήστε το iTiMO APP. ● Εγκαταστήστε την APP στη συσκευή σας και ανοίξτε την εφαρμογή.
- Εκκινήστε το Ωτοσκόπιο.
- Πατήστε το σύμβολο .
- Ένα νέο παράθυρο ανοιχτό όλα διαθέσιμα Συνδέσεις Wlan (Android). Για συσκευές IOS, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις, Wi-Fi.
- Επιλέξτε τη συσκευή iTiMO-xxxx, ενδέχεται να λάβετε μια προειδοποίηση ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη υπηρεσία Διαδικτύου σε αυτό το δίκτυο.
- Στη συνέχεια, επιστρέψτε στην εφαρμογή iTiMO και πατήστε ξανά το κουμπί δείτε το ζωντανό βίντεο από την κάμερα του Otoscope τώρα.
- Συνδέστε το κουτάλι καθαρισμού της επιλογής σας και αρχίστε να καθαρίζετε προσεκτικά.
- Προτείνουμε να τοποθετήσετε το Τηλέφωνο/Τάμπλετ σε Στήριγμα σε άμεση θέα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
	Παγώστε την πραγματική εικόνα
	Ξεκινήστε το ζωντανό βίντεο
	Πάρτε την εικόνα
	Έναρξη ή διακοπή της εγγραφής βίντεο
	Ανοίξτε τη γκαλερί, εδώ θα βρείτε τις εγγεγραμμένες φωτογραφίες και βίντεο.
	να σας φέρει ένα βήμα πίσω
	Ρυθμίσεων
	Αλλαγή από δεξιά προς αριστερή πλευρά

Κανονική χρήση

- Το ωτοσκόπιο πρέπει να εισάγεται στον ακουστικό πόρο μόνο όταν α τοποθετείται κουτάλι.
- Τοποθετήστε το κουτάλι στο ωτοσκόπιο έτσι ώστε το κουτάλι να εφαρμόζει σφιχτά.
- Προσέξτε ότι ο ακουστικός πόρος και η μύτη είναι ευαίσθητα.

Καθάρισμα

Πριν και μετά τη χρήση θα πρέπει να καθαρίζετε την κάμερα.

Οδηγίες ασφαλείας

→ Μην κοιτάτε στη λυχνία LED. → Επαναφορτίστε μόνο με το παρεχόμενο ή συμβατό καλώδιο USB. → Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με περιορισμένη νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας ή/και έλλειψη τεχνογνωσίας. → Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.


→ Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή τροποποίηση της συσκευής θεωρείται ακατάλληλη και εμπεριέχει σημαντικούς κινδύνους. → Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές λόγω ακατάλληλης χρήσης. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία της συσκευής πριν τη χρήση! → Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς. → Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχή κινδύνου πυρκαγιάς ή έκρηξης (π.χ. οξυγόνο κορεσμένα ή αναισθητικά περιβάλλοντα). → Αυτό το προϊόν δεν επιτρέπεται εισέρχονται ή να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές με ισχυρά μαγνητικά πεδία π.χ. σαρωτές μαγνητικής τομογραφίας. → Μην τροποποιείτε τη συσκευή. → Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να φορτίζει ασυνόδευτος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μόνο για χρήση από ενήλικες, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εύφλεκτων αναισθητικό μείγμα με αέρα, οξυγόνο ή οξείδιο του αζώτου ή σχεδόν εύφλεκτο ουσίες, ατμούς ή αέρια. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε θέρμανση ανοίγματα ή σε άμεσο ηλιακό φως. Διατηρήστε τη συσκευή στεγνή. Μην βυθίζετε το συσκευή στο νερό.

Συμβουλές για την προστασία του περιβάλλοντος:

Τα υλικά συσκευασίας είναι πρώτες ύλες και μπορούν να ανακυκλωθούν. Μην απορρίπτετε παλιά συσκευές ή μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα.

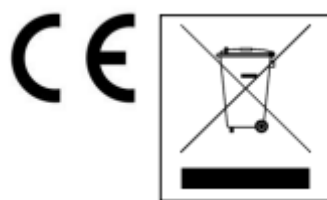

Καθάρισμα:

Προστατέψτε τη συσκευή από μόλυνση και ρύπανση (χρησιμοποιήστε α καθαρή κουρτίνα). Αποφύγετε τη χρήση ακατέργαστων, χονδρόκοκκων υλικών ή διαλύτες/επιθετικό καθαριστικό. Σκουπίστε την καθαρισμένη συσκευή με ακρίβεια.

Προμηθευτής: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Γερμανία

